

Oestrofact® SILVER protect

pena

SRB

Namena

Oestrofact® SILVER protect je lagana pena za spoljašnju upotrebu čije je osnovno delovanje stvaranje odbrambene barijere kao pomoć u tretmanu bakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija.

Oestrofact® SILVER protect pena formira zaštitnu barijeru na spoljašnjoj genitalnoj regiji i na taj način izoluje i štiti tkiva od spoljnih štetnih agenasa.

Oestrofact® SILVER protect pena kao glavne sastojke sadrži natrijum-hijaluronat i ekstrakt crnog sleza (*Malve silvestris extract*) i pomoćnu supstancu TIAB® kompleks (mikrokristalni titanijum-dioksid sa kovalentno vezanim jonima srebra).

Zahvaljujući svojstvima natrijum-hijaluronata i ekstrakta crnog sleza, proizvod formira odbrambenu barijeru i pomaže u tretmanu bakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija stvaranjem zaštitnog filma sa ciljem da izoluje i štiti tkivo od spoljnih iritanasa i omogućiti održavanje i obnavljanje normalnog fiziološkog stanja tkiva. Natrijum hijaluronat ima muko-mimetička, muko-adhezivna i viskoelastična svojstva. Hijaluronska kiselina je prirodno prisutna u vaginalnoj sluznici i drugim tkivima tela i odgovorna je za održavanje hidratacije tkiva. Može vezati veliku količinu vode i stoga je vlaženje kože u slučaju zapaljenja kao i očuvanje hidratacije ključna uloga njenog mehanizma delovanja.

Crni slez ima hidrirajuće, umirujuće i osvežavajuće dejstvo zahvaljujući visokom sadržaju sluzi koja brzo ublažava tipične tegobe izazvane zapaljenjem, poput svraba i peckanja uzrokovanih herpesom ili prisustvom Candide ili kondiloma, olakšavajući fiziološke procese oporavka sluznice vulve i vagine.

TIAB® kompleks sadrži mikrokristalni titanijum-dioksid sa kovalentno vezanim jonima srebra, čija je osnovna funkcija stvaranje barijere koja izoluje i štiti kožu od spoljnih iritanasa sprečavajući time pojavu infekcija.

TIAB® kompleks povećava otpornost zaštitnog filma, koji formiraju natrijum-hijaluronat i ekstrakt crnog sleza, na napade mikroba i time pojačava efekat barijere.

Sastav:

Voda, kaprilni/kaprinski trigliceridi, glicerol biljnog porekla, glikolni ekstrakt crnog sleza, TIAB® kompleks (mikrokristalni titanijum-dioksid sa kovalentno vezanim jonima srebra), Steareth2, Steareth21, benzalkonijum-hlorid, PVP K30, natrijum-hijaluronat, mentil-laktat, alantoin, mlečna kiselina

Propelent: butan-izobutan-propan

Uputstvo za upotrebu:

- Pre upotrebe dobro promućkati
- Pre primene operite i dobro osušite tretiranu regiju
- Nanesite tanki sloj pene na zahvaćeno područje
- Utrljavajte penu dok se ne osuši
- Ponovite nanošenje pene jednom ili više puta u toku dana
- Proizvod treba nanositi na područja koja su pogođena infekcijom sa pojavom prvih simptoma (svrab, peckanje, crvenilo, itd.).

Upozorenja

- Ne koristite proizvod u svrhe drugačije od onih navedenih u uputstvu
- Pre nanošenja proizvoda pažljivo operite ruke
- Nakon nanošenja Oestrofact® SILVER protect , penu utrljavati na tretirano područje dok se ne osuši
- Izbegavajte kontakt sa očima. U slučaju kontakta odmah temeljno isperite vodom
- Pena treba da formira zaštitni sloj
- Ne upotrebljavajte Oestrofact® SILVER protect nakon isteka roka upotrebe utisnutog na ambalaži
- Samo za spoljašnju upotrebu, ne gutati
- Ne koristite ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno
- Usled nedostatka konkretnih podataka o upotrebi ovog proizvoda tokom trudnoće i dojenja, kao i o upotrebi kod dece, obratite se lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete Oestrofact® SILVER protect penu
- Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na neku od komponenata
- Prestanite sa tretmanom u slučaju abnormalnih kožnih reakcija
- U slučaju duže upotrebe, posavetujte se sa lekarom
- Proizvod nema spermicidni niti kontraceptivni efekat

Kontraindikacije


Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja.

Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na komponente.

Nisu poznate interakcije sa lekovima i drugim lekovitim supstancama.

50 ml

Datum revizije: 11/2020



Upozorenje
H223 Zapaljiv aerosol.
H229 Boca pod pritiskom: može eksplodirati usled zagrevanja.
Držati dalje od izvora toplote, zagrejanih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora toplote. Zabranjeno pušenje. Ne bušiti i ne paliti bocu, čak i nakon što je upotrebljena. Zaštititi od sunčeve toplote. Ne izlagati temperaturama iznad 50°C.
Ne prskati direktno u otvoreni plamen ili drugi toplotni izvor.

Oestrofact® SILVER protect

pena

BIH/MNE

Namjena

Oestrofact® SILVER protect je lagana pena za spoljašnju upotrebu čije je osnovno djelovanje stvaranje odbrambene barijere kao pomoć u tretmanu bakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija.

Oestrofact® SILVER protect pena formira zaštitnu barijeru na spoljašnjoj genitalnoj regiji i na taj način izoluje i štiti tkiva od spoljnih štetnih agenasa.

Oestrofact® SILVER protect pena kao glavne sastojke sadrži natrijum-hijaluronat i ekstrakt crnog sleza (*Malve silvestris extract*) i pomoćnu supstancu TIAB® kompleks (mikrokristalni titanijum-dioksid sa kovalentno vezanim jonima srebra).

Zahvaljujući svojstvima natrijum-hijaluronata i ekstrakta crnog sleza, proizvod formira odbrambenu barijeru i pomaže u tretmanu bakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija stvaranjem zaštitnog filma sa ciljem da izoluje i štiti tkivo od spoljnih iritanasa i omogućiti održavanje i obnavljanje normalnog fiziološkog stanja tkiva. Natrijum hijaluronat ima muko-mimetička, muko-adhezivna i viskoelastična svojstva. Hijaluronska kiselina je prirodno prisutna u vaginalnoj sluznici i drugim tkivima tela i odgovorna je za održavanje hidratacije tkiva. Može vezati veliku količinu vode i stoga je vlaženje kože u slučaju zapaljenja kao i očuvanje hidratacije ključna uloga njenog mehanizma djelovanja.

Crni slez ima hidrirajuće, umirujuće i osvežavajuće dejstvo zahvaljujući visokom sadržaju sluzi koji brzo ublažava tipične tegobe izazvane zapaljenjem, poput svraba i peckanja uzrokovanih herpesom ili prisustvom Candide ili kondiloma, olakšavajući fiziološke procese oporavka sluznice vulve i vagine.

TIAB® kompleks sadrži mikrokristalni titanijum-dioksid sa kovalentno vezanim jonima srebra, čija je osnovna funkcija stvaranje barijere koja izoluje i štiti kožu od spoljnih iritanasa sprečavajući time pojavu infekcija.

TIAB® kompleks povećava otpornost zaštitnog filma, koji formiraju natrijum-hijaluronat i ekstrakt crnog sleza, na napade mikroba i time pojačava efekat barijere.

Sastav:

Voda, kaprilni/kaprinski trigliceridi, glicerol biljnog porekla, glikolni ekstrakt crnog sleza, TIAB® kompleks (mikrokristalni titanijum-dioksid sa kovalentno vezanim jonima srebra), Steareth2, Steareth21, benzalkonijum-hlorid, PVP K30, natrijum-hijaluronat, mentil-laktat, alantoin, mlečna kiselina

Propelent: butan-izobutan-propan

Uputstvo za upotrebu:

- Prije upotrebe dobro promućkati
- Prije primene operite i dobro osušite tretiranu regiju
- Nanesite tanki sloj pjene na zahvaćeno područje.
- Utrljavajte pjenu dok se ne osuši
- Ponovite nanošenje pjene jednom ili više puta u toku dana
- Proizvod treba nanositi na područja koja su pogođena infekcijom sa pojavom prvih simptoma (svrab, peckanje, crvenilo, itd.).

Upozorenja

- Ne koristite proizvod u svrhe drugačije od onih navedenih u uputstvu
- Prije nanošenja proizvoda pažljivo operite ruke
- Nakon nanošenja Oestrofact® SILVER protect , pjenu utrljavati na tretirano područje dok se ne osuši
- Izbegavajte kontakt sa očima. U slučaju kontakta odmah temeljno isperite vodom
- Pjena treba da formira zaštitni sloj
- Ne upotrebljavajte Oestrofact® SILVER protect nakon isteka roka upotrebe utisnutog na ambalaži
- Samo za spoljašnju upotrebu, ne gutati
- Ne koristite ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno
- Uslijed nedostatka konkretnih podataka o upotrebi ovog proizvoda tokom trudnoće i dojenja, kao i o upotrebi kod djece, obratite se lekaru ili farmaceutu za savjet prije nego što uzmete Oestrofact® SILVER protect pjenu
- Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na neku od komponenata
- Prestanite sa tretmanom u slučaju abnormalnih kožnih reakcija
- U slučaju duže upotrebe, posavetujte se sa lekarom
- Proizvod nema spermicidni niti kontraceptivni efekat

Kontraindikacije


Nisu zabilježeni slučajevi predoziranja.

Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na komponente.

Nisu poznate interakcije sa ljekovima i drugim ljekovitim supstancama.

50 ml


Datum revizije: 11/2020



Upozorenje
H223 Zapaljiv aerosol.
H229 Boca pod pritiskom: može eksplodirati usled zagrevanja.
Držati dalje od izvora toplote, zagrejanih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora toplote. Zabranjeno pušenje. Ne bušiti i ne paliti bocu, čak i nakon što je upotrebljena. Zaštititi od sunčeve toplote. Ne izlagati temperaturama iznad 50°C.
Ne prskati direktno u otvoreni plamen ili drugi toplotni izvor.

NTC Srl
Via Luigi Razza 3
20124 Milano, Italija

CE 0477

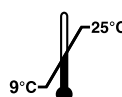

3203377-1